

Zariadenie pre masáž krku

Hlas + diaľkové ovládanie

Masírujte 15 minút každý deň, kdekoľvek a kedykoľvek



Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny

Popis produktu

Ďakujeme, že ste si vybrali náš prístroj na masáž krk. Pred použitím si prosím podrobne prečítajte tento návod, aby ste plne porozumeli správnemu používaniu tohto masážneho prístroja na krk. Návod si prosím riadne uschovajte pre budúce použitie. Poznámka: Spoločnosť si vyhradzuje právo vylepšiť produkt a návod na použitie, ak dôjde k akejkoľvek zmene bez upozornenia, vzhľad produktu by mal pretrvať nezmenený. Táto brožúra bola starostlivo skontrolovaná, ale nevylučuje možné chyby tlače alebo nedorozumenia v obsahu, prosím, uvedomte si, že naša spoločnosť si vyhradzuje právo ju interpretovať.

Podmienky nabíjania

- 1. Na nabíjanie tohto produktu použite USB nabíjačku dc5v pre nabíjanie mobilného telefónu
- 2. Prvé nabitie by malo trvať dlhšie ako 4 hodiny
- 3. Na nabíjanie tohto produktu nepoužívajte nabíjačku s výstupným napätím vyšším ako 6V
- 4. Nenabíjajte na miestach, ako je priame slnečné svetlo, vysoká teplota, vlhkosť, prach, vibrácie atď.

Čistenie a údržba

- 1. Pri čistení a údržbe tohto produktu vypnite hostiteľa, použite vlhké papierové utierky na čistenie elektródových podložiek, keď je obzvlášť znečistený, môžete na utieranie a dezinfekciu použiť lekársky lieh (koncentrácia alkoholu 75 %).
- 2. Počas údržby utrite neutrálnym čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou. Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky. Nenamáčajte ani neoplachujte vo vode.

Návrhy:

1. Pri prvom použití batérie alebo po dlhšom odstavení výrobku postupujte podľa návodu na obsluhu nabíjania, aby ste sa uistili, že pred použitím funguje správne.
2. Tento produkt sa odporúča pre jedného používateľa. Pri použití pre viacerých používateľov pred použitím očistite elektródové podložky na produkte
- 3 Odporúčané pre osoby staršie ako 16 rokov.
4. Odporúča sa nepoužívať ho s iným zdravotníckym zariadením alebo s viac ako dvoma výrobkami, čo môže spôsobiť fyzické nepohodlie
5. Odporúča sa nepoužívať na miestach s vysokou teplotou a vlhkosťou alebo na miestach s vodou.
6. Odporúča sa nepoužívať na miestach náchylných na vibrácie alebo v blízkosti silných elektromagnetických polí.
7. Nepoužívajte pri vedení auta, inak môže spôsobiť fyzické nepohodlie v dôsledku nadmernej stimulácie, čo môže viesť k nehode.

Nevhodné pre niektoré osoby

Pacienti so zhubnými nádormi, pacienti so sklonom ku krvácaniu, tehotné ženy, pacienti s akútnym hnisavým zápalom, pacienti s kardiostimulátorom, pacienti s kovovými implantátmi, v blízkosti srdca.

Technické parametre

Názov produktu: Neck Massager

Model produktu: F2+

Hmotnosť produktu: 270 g

Nabijacie napätie: DC 5v

Menovité napätie: Dc 3.7v

Menovitý výkon: 5w

Pracovný čas: 15 minúty


Rozmery produktu: 165 * 160 * 46mm

Nabijací prúd: 500mA


Platné normy: GB 4706.1-2005

GB 4706.10-2008

Nákres produktu

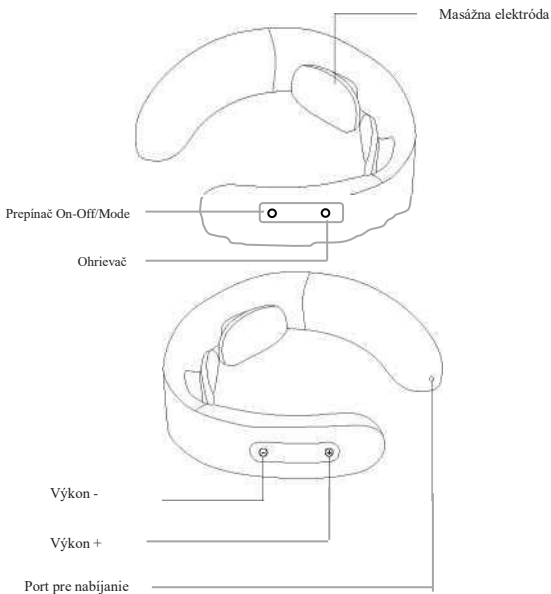

Nákres diaľkového ovládača

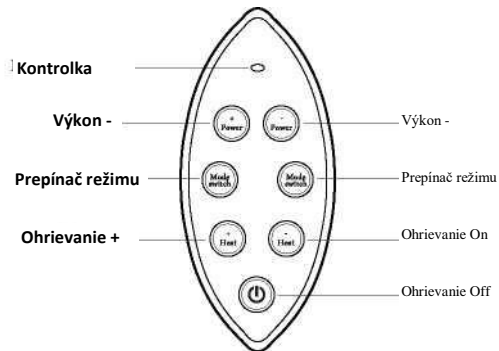

Pokyny ku produktu

1. Pred použitím: navlhčíte povrch pokožky krčnej chrbtice, priložte prípravok na krk, elektródu prilepte na kožu krčnej chrbtice, upravte polohu prípravku
2. Zapnite. Dlhو stlačte (© tlačidlo napájania, kontrolka bliká, produkt sa zapne
3. Prepínanie režimov: krátkym stlačením tlačidla napájania © prepnete režim, jedným kliknutím prepnete režim 2 z režimu 1 a potom prepnete režim 3 z režimu 2 atď. a potom prepnete do prvého režimu pri poslednom režime (produktové body Štyri režimy, režim 1 je automatický režim, režim 2 je režim akupunktúry, režim 3 je režim kladívka a režim 4 je režim miesenia)
4. Režim horúceho obkladu: krátko stlačte kláves s tromi vlnkami, jedným stlačením vypnete horúci obklad, opätovným stlačením zapnete horúci obklad, opätovným stlačením vypnete horúci obklad
5. Zvýšte intenzitu masáže: krátkym stlačením tlačidla © zvýšite intenzitu masáže, kliknutím zvýšite intenzitu masáže o jednu úroveň, produkt má 15 úrovní nastavenia intenzity
6. Znížte intenzitu masáže: krátkym stlačením číselného tlačidla Q znížite intenzitu masáže, jedným stlačením znížite intenzitu masáže o jeden stupeň, minimálna intenzita produktu je 1 stupeň a pri nastavení na 0 je zariadenie v pokoji.
7. Hlasové vysielanie: stlačte tlačidlo napájania a potom súčasne stlačte tlačidlo vlny na prepnutie hlasového vysielania, jedna operácia na zatvorenie hlasovej operácie a jedna na otvorenie hlasu
8. Po prepnutí režimu intenzita masáže klesne na prvú predvolenú úroveň. Po prepnutí režimu stlačte tlačidlo + na zvýšenie intenzity masáže

Poznámky

1. Ak sa pri používaní tohto produktu cítite neprijemne, okamžite ho prestaňte používať
2. Ak máte na tele alebo na pokožke nepríjemný pocit, okamžite prestaňte zariadenie používať
3. Nemasirujte elektronicnými časťami zariadenia, inak môže dôjsť k poškodeniu elektronicných častí: (elektronicke hodinky)
4. Ak dôjde k abnormálnej situácii, okamžite vypnite napájanie a odpojte zariadenie, inak môže spôsobiť vysokú teplotu alebo skrat, môže dôjsť k nehode a súčasne kontaktujte zákaznicky servis
5. Nepripájajte ani neodpájajte USB nabíjací kábel mokrými rukami, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
6. Nepoužívajte ho pre deti alebo ľudí bez schopnosti prejavit' vedomie, inak môže spôsobiť fyzické nepohodlie alebo nehody
7. Nepoužívajte výrobok v kúpeľni alebo na iných miestach s vysokou teplotou ani nepoužívajte výrobok pri sprchovaní, inak môže dôjsť k silnému zásahu elektrickým prúdom a poškodeniu výrobku.
8. Nepoužívajte počas spánku, inak môže dôjsť k poruche Elektródová podložka sa môže presunúť do iných častí a spôsobiť fyzické nepohodlie
9. Nepoužívajte ho počas riadenia auta, môže spôsobiť fyzické nepohodlie v dôsledku nadmernej stimulácie, čo môže viesť k nehode
10. Nelepte elektródovú podložku na kožu na dlhší čas, môže spôsobiť zápal kože
11. Na dotyk elektródových podložiek počas masáže nepoužívajte kovové predmety, ako sú opasky a náhrdelníky, inak môžu byť vystavené silnému elektrickému šoku
12. Nepoužívajte tú istú časť dlhší čas (viac ako 30 minút), mohlo by dôjsť k únave masážnej časti a nepohodliu.
- 13-Prosím, noste tento výrobok správne pre krčnú chrbticu, noste ho symetricky, inak môže dôjsť k nehodám alebo fyzickému nepohodliu
14. Pri odpájaní nabíjacieho kábla USB od produktu neťahajte za kábel, pri vyťahovaní by ste mali držať zástrčku, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu.
- 15-Elektrodová podložka produktu má funkciu povrchového ohrevu, pred použitím sa poraďte so svojim lekárom, ak nie ste citlivý na teplo alebo prehriatie.
16. Keď výrobok pracuje dlhší čas, povrch elektródovej dosky sa zahreje, čo je normálne
17. Pred použitím sa odporúča overiť, či tlačidlo hostiteľa funguje správne
18. Pri prvom použití alebo po dlhšom odstavení produktu sa batéria vybije, postupujte podľa pokynov na nabitie batérie, aby ste sa uistili, že bude fungovať normálne
- 19-Pri likvidácii tohto produktu prosím postupujte v súlade s príslušnými nariadeniami mesta na ochranu životného prostredia.

Návrhy

1. Nevhodné pre maloletých
2. 19-Pri likvidácii tohto produktu prosím zlikvidujte v súlade s príslušnými nariadeniami mesta na ochranu životného prostredia, čo môže spôsobiť znečistenie životného prostredia
3. Odporúča sa používať 2-3 cykly denne (15 minút na každý cyklus).

Nebezpečný (nikdy ho nepoužívajte s nasledujúcimi zdravotníckymi pomôckami)

1. Kardio stimulátory a iné implantovateľné lekárske elektronické zariadenia
2. Životne dôležité lekárske elektronické zariadenia, ako sú umelé srdce a pľúca
3. Lekárske elektronické zariadenia, ako sú elektrokardiografy, môžu spôsobiť poruchu týchto lekárskech elektronických zariadení a môžu byť život ohrozujúce

Varovanie

1. Ak pacient na svojom tele používa vysokofrekvenčné chirurgické zariadenie aj tento produkt, elektródové podložky produktu môžu spôsobiť popáleniny alebo poškodiť produkt.
2. Ak sa produkt používa v blízkosti zariadenia na úpravu krátkych vln alebo mikrovlnnej rúry (do 1 metra), výstup produktu môže byť nestabilný
3. Elektródové podložky počas masáže by sa mali vyhýbať ranám a jazvám
4. Počas masáže by elektródové vankúšiky nemali byť umiestnené v blízkosti srdca hrudníka, inak sa zvýši riziko fibrilácie srdca
5. Produkt sa odporúča pre použitie pre jedného používateľa
6. Pri použití krížovými používateľmi pred použitím očistite elektródové podložky na výrobku. Pri používaní produktu by elektródové podložky mali byť pevne pripevnené ku koži a mali by sa rovnomerne dotýkať
7. Elektródové podložky tohto produktu majú funkciu generovania tepla, ktorá môže spôsobiť nízko teplotné popáleniny pri použití funkcie horúceho obkladu v tej istej časti po dlhú dobu (viac ako 15 minút)
8. Ak sa počas alebo po použití necítite dobre, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa s lekárom

1. Tento výrobok obsahuje lítiovú batériu, výrobok nerozoberajte, neupravujte, neponárajte do vody ani nehádzajte do ohňa, inak môže dôjsť k poškodeniu výrobku a výbuchu

V nasledujúcich prípadoch sa pred použitím poraďte so svojim lekárom, inak môže dôjsť k nehode alebo fyzickému nepohodliu

1. Pacienti, ktorí sú liečení a cítia sa abnormálne
2. Pacienti s abnormálnymi srdcovými a mozgovými problémami
3. Pacienti, ktorých telesná teplota presahuje 38 stupňov (obdobie horúčky)
4. Pacienti s infekčnými chorobami
5. Pacienti s poruchou vnímania kože alebo abnormálnou pokožkou
6. Pacienti užívajúci lieky
7. Pacienti s abnormálnym krvným tlakom
8. Pacienti, ktorí nemôžu slobodne vyjadriť svoje želania
9. Pacienti so zmyslovými poruchami v dôsledku vysokej poruchy cirkulácie periférnych nervov v dôsledku cukrovky

Výzva

1. Nepoužívajte s inými zdravotníckymi pomôckami alebo s viac ako dvoma z tohto produktu, inak to môže spôsobiť nevoľnosť alebo fyzické nepohodlie
2. Nepoužívajte na iné účely ako na masáže popísané v návode na použitie, inak môže dôjsť k nehode a poruche
3. Nepoužívajte elektródové podložky so zárezmi alebo poškodením na povrchu, inak môže dôjsť k nehodám a poruchám.
4. Nerozoberajte, neopravujte a neupravujte tento výrobok bez povolenia, inak môže spôsobiť poruchu alebo úraz elektrickým prúdom

Riešenie problémov

Stav	Možné príčiny a náprava
Nedá sa spustiť	Interná nabíjateľná batéria má nedostatočnú energiu a je nabitá včas.
	Potvrďte, či je stlačený kláves hostiteľského produktu
Batéria je vybitá, alebo sa nezobrazuje jej stav	Skontrolujte, či je USB pripojený k hostiteľovi a adaptéru
Vyzera normálne, no neprebíha žiadna masáž.	Dotýka sa elektródová podložka priamo pokožky? Upravte polohu tak, aby bola blízko pokožky
	Sú medzi elektródovými vankúšikmi a pokožkou predmety, ako sú vlasové odevné doplnky? Odstráňte dané predmety
	Je stupeň výkonu 1.? Upravte pre zvýšenie intenzity masáže
Mravčenie	Ak nie je elektródová podložka blízko pokožky, musíte upraviť polohu tak, aby bola blízko pokožky
	Je doba masáže príliš dlhá? Odporúčame aplikovať masáž 15 minút dva krát denne
	Je masáž príliš silná? Nastavte nižšiu úroveň výkonu
	Je pokožka alergická na elektródové podložky? Ťažké alergie je potrebné znečistiť
	Studené podnebie a suchá pokožka? Na zvlhčenie pokožky použite mokrý uterák
	Sú na povrchu kože nejaké rany? Neprikladajte elektródu na ranu kvôli masáži
Stimulácia je slabá	Je elektródová podložka masážneho prístroja pevne pripevnená ku koži na krku? Treba upraviť polohu tak, aby bola blízko pri pokožke a upraviť vhodnú silu
	Je elektródová podložka špinavá alebo zaolejovaná? Vyčistite povrch elektródy
	Je batéria slabá? Ak je batéria slabá, nabite ju
	Je intenzita masážnej úrovne príliš nízka? V prípade, že dôjde k inému poruchovému stavu,

ako je uvedené vyššie, okamžite vytiahnite zástrčku a kontaktujte náš popredajný servis. Nerozoberajte, neopravujte ani nevymieňajte diely sami

Po predaji

Od dátumu predaja, bez ohľadu na to, či je tu dôvod uplatnenie záruky alebo nie, môžete vybaviť vrátenie tovaru do troch dní so záručným listom produktu alebo faktúrou (účtenkou) na pôvodný nákupný pult/online predajnú platformu. Pri vrátení výrobku sa musíte uistiť, že výrobok nebol poškodený. , Vonkajší obal, návod a ostatné príslušenstvo sú neporušené a bez poškodenia. Produkt má poruchu výkonu do jedného roka od dátumu predaja. Môžete využiť bezplatné opravy. Pri oprave predložte záručný list produktov našej spoločnosti (bezplatné opravy prisľúbené našou spoločnosťou zahŕňajú iba Pracovnú dobu a náklady na materiál, okrem nákladov na dopravu . Spoločnosť neposkytuje opravy na mieste). Pri oprave predložte záručný list produktov našej spoločnosti (bezplatné opravy prisľúbené našou spoločnosťou zahŕňajú iba Pracovnú dobu a náklady na materiál, okrem nákladov na dopravu a spoločnosť neposkytuje opravy na mieste).